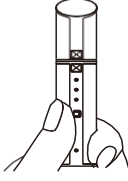


# 商品企画提案書

	ブランド名		商品名			
	KINGDOM CARES®		目元・唇美容液			
	JANコード	4582591240011 (白) 4582591240028 (ピンク)	発売元	K・SKIN株式会社		
	型番	KC6680	住所	東京都台東区台東1-27-11やわらぎビル1F		
	上代 (税抜き)	6800円	入数	50		
	上代 (税込)	7480円	ロット	50		
	本体(mm)		梱包(mm)		外箱(mm)	
	幅	129	幅	160	幅	425
	奥行き	25	奥行き	70	奥行き	385
	高さ	25	高さ	38	高さ	200
	総重量	59g	重量	138g	重量	7.65kg
	発売日		原産国	日本		

商品説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>目元や唇のさまざまな問題を解決。目元をすっきり明るく、透明感のある唇に。</li> <li>目の下の【くま】を改善します。</li> <li>下まぶたを引き締め目じりジワの改善をします。</li> <li>アイクリームエッセンスの導入。</li> <li>唇の乾燥や荒れをケアします。</li> </ul>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

使用方法	<p><b>「目頭を引っ張ります」</b> 美容液を適量目元に塗って目頭の肌の保湿して、“温熱美颜”モードを起動します。片手で機器を握って、プローグが目じりの下の約1cmのところに接触して押さえるように適切に力をかけてください。プローグを下から上へ、ゆっくりと約2-3cmを引張ってから、ここで2-3秒止まってください。5-6回繰り返したら、目じりの輪郭の引締め強化に有効です。ご利用の際はゆっくりと動かしてください。</p> <p><b>「目の周りや涙袋の改善」</b> 目の下の肌を十分に潤います。“温熱美颜+振動マッサージ”モードを起動します。片手で機器を握って、プローグを使って目の周りや涙袋の部位を軽くマッサージして、適切な力でゆっくりと動かして目頭から目じりへと移動してください。8-10回適度に繰り返してください。</p> <p><b>「目じりしわの改善」</b> 適度な量のしわ改善クリームなどを塗って、“温熱美颜+栄養導入”モードを起動します。四本の指で目じりの下を押さえて、この部分の皮膚を固定して、片手で機器を握って、プローグを皮膚と接触させて適切な力でめじり、しわの中心部を押さえてください。プローグはめじり、しわの垂直方向に沿って、ゆっくりと約1cm引張ってからこの部位で3-5秒程止まって、めじり、しわが引っ張り締めるように待ちます。5回繰り返してから次の部位で行います。</p> <p><b>「アイクリームエッセンスの導入」</b> 適度な量のアイクリームを目の周りに塗って、肌に均一に指で塗ってください。“温熱美颜+栄養導入+振動マッサージ”ケアモードを起動します。プローグでスキンケアが塗られた目元の皮膚を軽くマッサージして適切な力でゆっくりと中から外へ、下から上へ移動してください。5-6回繰り返してください。</p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>本品を使用する時は必ず手を拭いてからご使用ください。</li> <li>同じ箇所に使い続けることなく、軽く動かしながらご使用ください。</li> <li>強く押し付けるのではなく、肌の上を滑らせる様にご使用ください。</li> <li>美容液や美容クリームと一緒に使用する事をお勧めします。</li> <li>必要に応じていろんなケアモードを自由に組み合わせしてご使用ください。</li> <li>ご利用前はコットンなどでアルコールをつけてプローグを軽く拭いてください。</li> <li>ご使用中は手は必ず本体の飾用リングに触ってください。</li> </ul> 
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

保管時の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>お子様の手の届かない所に保管ください。</li> <li>湿気やほこりの多いところで保管すると故障の原因となりますのでお止めください。</li> <li>直射日光の当たる場所や高温になる場所は避けてください。</li> </ul> <p>※上記の項目を守って頂けない場合はやけど、火災の原因又は故障や破損を引き起こす恐れがありまた、周囲の物を変形、変色させる可能性がありますので、保管時には十分ご注意ください。</p>
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------